

2026

BIOSAN
LABORATUVAR CİHAZLARI

QUALİTEC KİMYASAL DOLABI

KİMYASAL DOLABI
KATALOĞU



www.biosankimya.com
biosan@biosankimya.com

Qualitec

1993 Yılında Konya'da kurulan Biosan Kimya, başta üniversitelere, sanayi laboratuvarlarına ve devlet kurumlarına laboratuvar alanında çözümler sunmaktadır.

Biyokimya endüstrisi, ilaç endüstrisi, ameliyathaneler ve araştırma laboratuvarları gibi hassas uygulama alanları olan sektörlerde, belirtilen koşullara uygun laboratuvarların ve cihazların temini konusunda duyarlı ve aktif bir çalışma politikasına sahip olan firma, yaygın olarak kullanılan bazı cihazların seri üretimini de yapmaktadır.

Laboratuvar tezgah mobilya sistemleri, biyogüvenlik kabinleri, laminar akışlı kabinler, çeker ocaklar, PCR kabinleri, kimyasal saklama dolapları, temiz odalar ve temiz oda bileşenleri gibi ürünlerle hizmet sunan Biosan Kimya, çıkar çatışmasından uzak, yasal düzenlemelerin getirmiş olduğu standartlarda, çevreye duyarlı olarak hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan firmamız, müşteriden gelen her türlü talebi değerlendirerek ARGE departmanının çalışmalarına yön vermektedir.

Hizmet merkezi Konya'da istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam eden Biosan, hizmet alanını Türkiye genelinde genişletmek için bayilik çalışmalarına yönelmiştir. Öncelikli hedefini koşulsuz müşteri memnuniyeti olarak belirleyen firma, uygun fiyat politikası, ürün danışma sistemi ve teknik destek hizmetleriyle çalışmalarını devam ettirmektedir.

VİZYONUMUZ

- Üretim sektörünün kalitesi için kaliteli laboratuvarlar kurmak.
- Kaliteli laboratuvarlar için kaliteli cihazlar üretmek.

MİSYONUMUZ

- Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer üretmeyi esas alan firmamız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile sektörde "en iyi" ve "daima iyi" olmanın kriterlerini yönetmek,
- Laboratuvar sektöründe ithal gelen ürünlerin muadilini yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Firmamızla birlikte laboratuvar sektörünün kalitesinin yükselmesine çalışmayı,
- Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
- Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
- Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
- İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, kalite politikası olarak belirlemiştir.

NEDEN BİOSAN

- 30 yıllık tecrübe
- Dünya çapındaki operasyonlarda kanıtlanmış sistemler
- Tek iletişim noktası
- Satış sonrası destek
- Müşteri memnuniyeti

- İmal edilen kimyasal dolapları laboratuvar standartlarına göre üretilip test edilmektedir. ISO 9001 üretim standartlarına göre imalatı yapılmaktadır.
- Kimyasal dolapların gövdesi 1/1,2 mm statik toz boyalı galvanizli sacdan üretilen bu dolaplar, sızıntı ve diğer risklere karşı dayanıklıdır. Çekmeceli veya sabit raflı seçenekleriyle esneklik sunar ve havalandırma sistemi, kimyasal buharlarının tahliyesini sağlayarak ortamın güvenliğini artırır.
- Kimyasal buharlarının birikmesini önlemek için dolaplarda havalandırma sistemi bulunur. Doğal ya da mekanik havalandırma sayesinde zararlı gazlar dış ortama güvenli bir şekilde tahliye edilir, böylece kullanıcıların sağlığı korunur.
- Farklı türde kimyasalların güvenli saklanabilmesi için dolap içinde özel bölmeler ve ayarlanabilir raflar bulunur. Sızdırmaz tepsiler sayesinde dökülme durumunda kimyasalların yayılması önlenir.
- Yetkisiz erişimi engellemek amacıyla kimyasal saklama dolaplarında kilit sistemleri bulunur. Bazı modellerde, acil durumlarda otomatik kapanan güvenlik mekanizmaları da yer alır.
- Kimyasal maddelerin doğru bir şekilde saklanabilmesi için dolap üzerinde uyarı etiketleri bulunur. Tehlike sembolleri ve içerik bilgileri, olası kazaları önlemek ve doğru kullanım sağlamak amacıyla net bir şekilde belirtilmiştir.

1/1,2 mm statik toz boyalı galvanizli sac gövde

Zaman saatli sessiz çalışan polipropilen fan

Havayı eşit dağıtan hava kanalı tasarımı

Çekmeceli raflar*

Sabit raflar*

Polipropilen raflar*

Rijit gövde yapısı



İspanyolet sistemli güvenlik kilidi*

Sızdırmaz raflar/tepsiler

Zeminde sıvı toplama havuzu*


Çift cidarlı gövde yapısı*

Kolay ayarlanabilen raf yükseklikleri

180° açılabilir çift kapak veya tek kapaklı*

DİKEY AKIŞLI LAMİNAR KABİN

KABİN ÖLÇÜLERİ

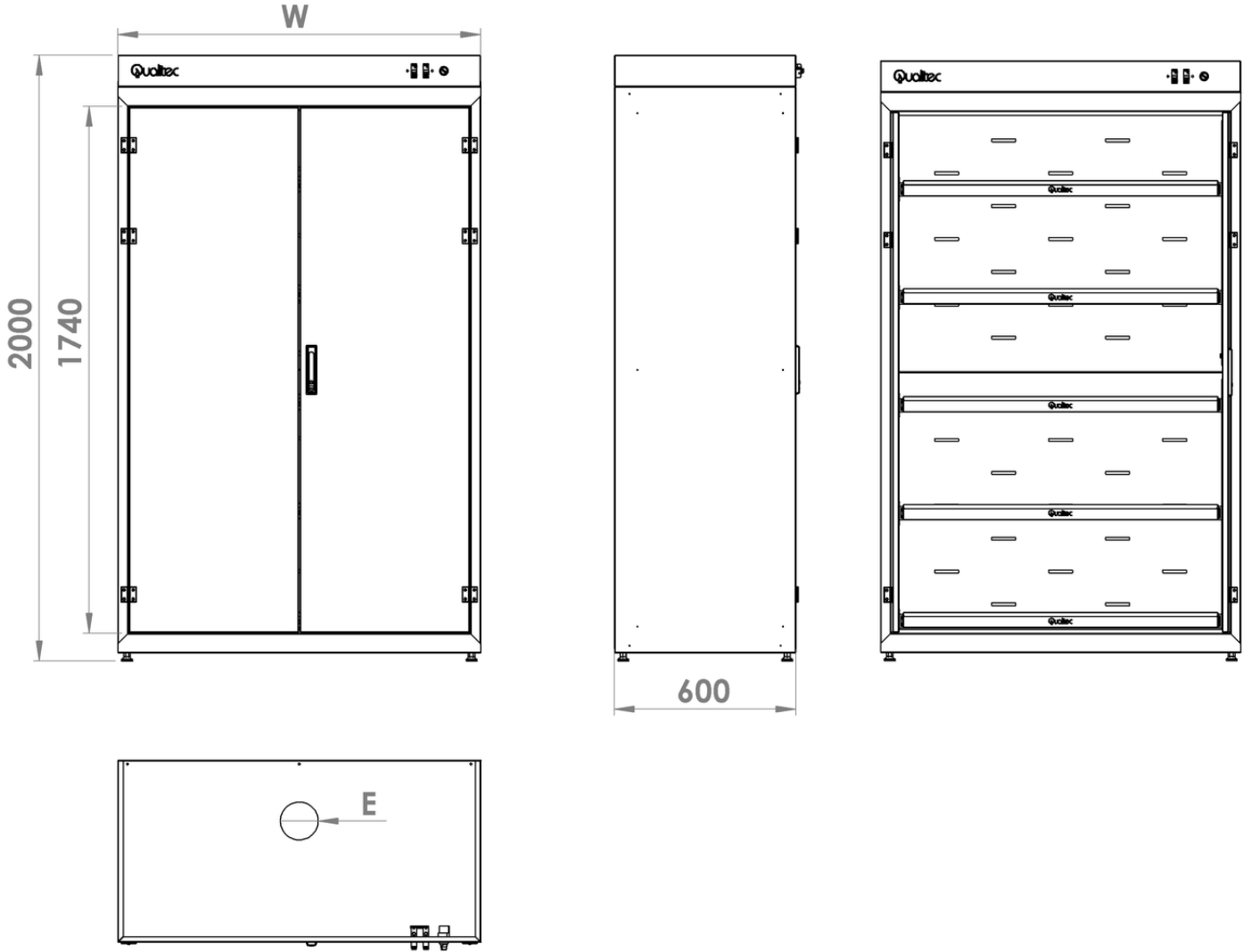

Kimyasal Dolabı	CSC-60	CSC-90	CSC-120
W (genişlik mm)	600	900	1200
Raf genişlik (mm)	500	800	1100
Çekmece genişlik (mm)	450	750	1050
İç yükseklik (mm)	1780	1780	1780
İç derinlik (mm)	520	520	520
Ağırlık (kg)	88	114	140
Nakliye ağırlık (kg)	94	120	146
Nakliye ölçüler (WxDxHmm)	640x640x2100	940x640x2100	1240x640x2100



ÜRETİMLER

BİOSAN

LABORATUVAR CİHAZLARI



Qualitec

